



# Gebrauchsanweisung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für Dr. Mark's HyGenie entschieden haben. Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung jeden Tag oder nach jedem Gebrauch, um Ihre Apparatur jederzeit, frisch sauber zum Gebrauch bereit zu haben.


**1. ÖFFNEN:** Halten Sie den Boden (blau) und den transparenten Körper des HyGenie in einer Hand. Drehen Sie nun den weissen Deckel egal auf welche Seite bis es klickt. Heben Sie den weissen Deckel ab.

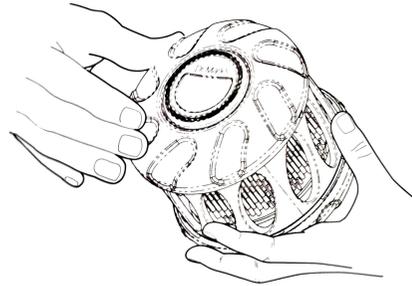


**2. POSITIONIEREN:** Betten Sie Ihre Dentale Apparatur ind die Bürsten des blauen Bodens ein. Orthodontische Algier können auch nebeneinander platziert werden (siehe Bild).

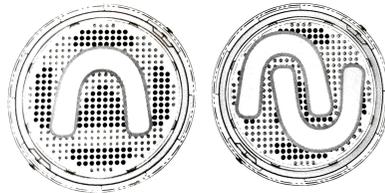

**3. SCHLIESSEN:** Bringen Sie die Pfeile auf dem Deckel und dem transparenten Körper in eine Linie und drücken Sie den Deckel leicht auf den Körper um den HyGenie zu verschliessen. Drehen Sie nun den Deckel und er wird klicken und somit verriegeln.

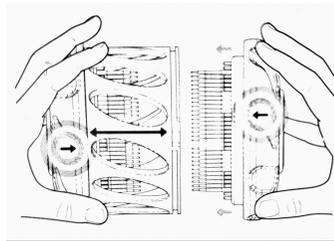


**4. DENTALFRESH:** Halten Sie den HyGenie über das Waschbecken und drücken Sie 3-5 grosszügige Tropfen Dentalfresh durch die Öffnungen des Hygenie - Geben Sie ein paar Tropfen Wasser dazu.

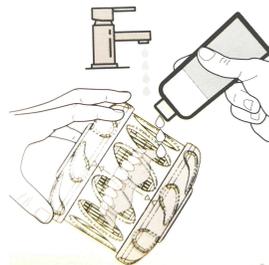

**5. WASCHEN:** Rotieren Sie die beiden Griffschalen in entgegengesetzte Richtung, oder wechseln Sie die Bewegungen der oberen und unteren Schale ab. Rotieren Sie weiter, bis nach 30-45 Sekunden deutlich Schaum aus den Öffnungen tritt




**6. SPÜLEN:** Spülen Sie den Hygenie unter fliessendem Wasser ab, während sie die beiden Griffschalen weiterhin gegenläufig rotieren, bis kein Schaum mehr sichtbar ist und nur klares Wasser austritt.

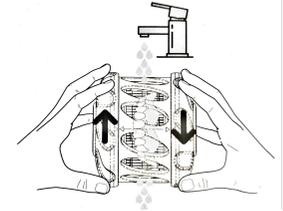

**7. TRAGEN, LAGERN, SCHÜTZEN:**

Jetzt ist Ihre Apparatur sauber, frisch und bereit um sie zu tragen, oder sicher in Dr. Mark's HyGenie zu lagern, bis Sie wieder gebraucht wird.

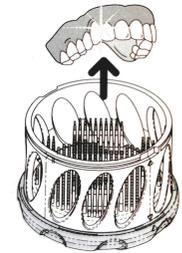

## Pflege & Tips

Dr. Marks HyGenie ist selbstreinigend und selbsttrocknend - genau wie Ihre Zahnbürste.

Bei regelmässigem Gebrauch und guter Pflege können Sie Ihren HyGenie bis zu zwei Jahre gebrauchen.

Entfernen Sie die Silikon-Einsätze regelmässig und reinigen Sie diese im Geschirrspüler.

Wir Empfehlen, die Silikon-Einsätze alle 6 Monate auszuwechseln. Bestellen Sie direkt unter [www.swissclean-dental.ch](http://www.swissclean-dental.ch)

Schauen Sie für die richtige Anwendung auch das Youtube Video mit link auf unserer Website an: [www.swissclean-dental.ch](http://www.swissclean-dental.ch)

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, oder schreiben Sie uns auf [hygenie@swissclean-dental.ch](mailto:hygenie@swissclean-dental.ch)